

健保適用

静かで快適なSAS治療をサポート  
持続陽圧呼吸療法装置（CPAP）

# スリープメイト<sup>®</sup> S6

医療用具輸入承認番号：21300BZY00092000




## *Quality of Life*

テイジンは、Quality of Lifeの向上を第一に  
睡眠時無呼吸症候群の診断器から治療器までラインアップ。  
スリープメイトS6は、ソフトなマスクと静音設計で  
快適なCPAP療法をお届けします。



# より快適なCPAP療法のため



睡眠時無呼吸症候群 (SAS) は「一晩7時間の睡眠中に30回以上の無呼吸(10秒以上の呼吸気流の停止)があり、そのいくつかはnon-REM期にも出現するもの\*」と定義され、主に上気道が閉塞することにより起こります。CPAP療法は鼻マスクを介して一定圧力の空気を気道に送り、上気道を常に陽圧に保つことで気道をひろげ、無呼吸の発生を防ぎます。

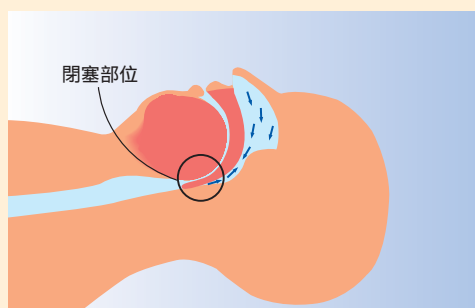

閉塞型睡眠時無呼吸

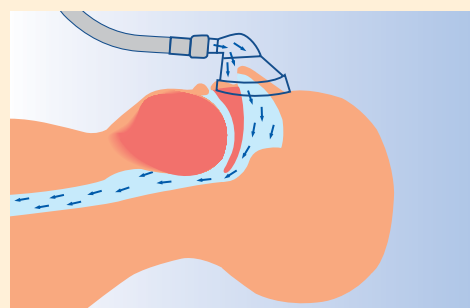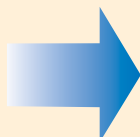

CPAP療法

\* Guilleminault C., et al. : The sleep apnea syndromes. Ann. Rev. Med. 27 : 465-484, 1976

# に

## 静かな運転音

高性能ファンモーターと送気回路の工夫により、運転音が当社従来器にくらべ、約20%静かになりました。

## 軽量化・省電力化

1.7kgと当社従来器より軽くなり、出張や旅行への持ち運びがさらに便利になりました。消費電力は20Wと省エネ設計です。

## 安定した圧力供給

呼気 ↔ 吸気時の圧力変動に対して、強力なファンモーターがフォロー。圧力の変動を小さくし、安定した治療圧を供給します。

## ウルトラミラージュマスク

日本の患者さん向けに設計されたマスクです。マスクフィッティングが簡単にでき、漏れが少なく快適なCPAP療法を可能にします。


帝人(株)社内資料



## 処方圧力設定

処方圧の設定には、専用の換気条件設定器「ユニバーサルコントロールユニット」を用います。

在宅療養中は処方設定済みのスリープメイトS6のみを使用しますので、誤って処方設定を変えてしまう心配がありません。

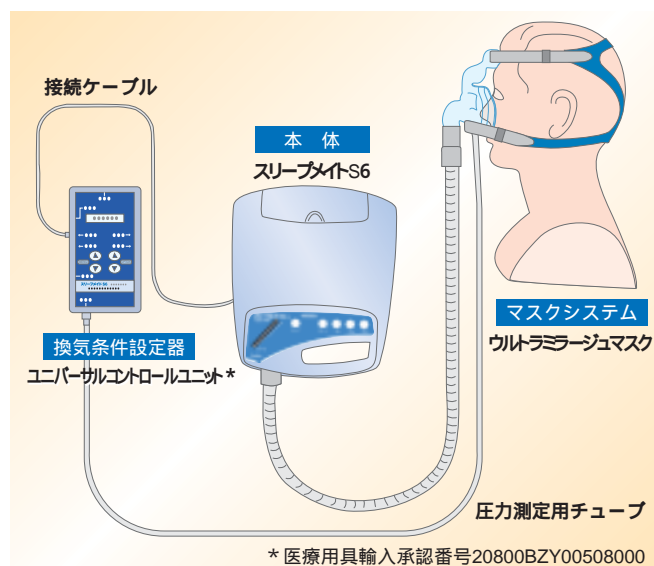

## ウルトラミラージュマスク

ウルトラミラージュマスクは、日本の患者さんの顔に合わせて設計。鼻柱にフィットして、空気漏れを防ぎ、二重のクッションでしっかり安定します。



## 製品構成

- スリープメイトS6本体
- フィルター（予備）
- 電源コード
- エアチューブ
- マスクシステム
- キャリーバッグ
- 取扱説明書

## 主な仕様

販売名	スリープメイトS6
機種	Pシリーズ
圧力調整範囲	4～20cmH <sub>2</sub> O
重量	1.7kg
寸法	120mm(H)×294mm(L)×244mm(W)
電源	AC100±10% 50/60Hz
電源入力/消費電力	120VA/20W(20cmH <sub>2</sub> O運転時)
電撃保護形式	クラス 機器 CF形機器
付属機能	ディレイタイマー

改良のため、性能・仕様は予告なく変更することがあります。

## 加温加湿器(オプション)

鼻や喉の乾燥感を抑えるため、加温加湿器を用意しています。加温することによって十分な湿度を得ることができます。



輸入先製造元：Fisher&Paykel社 輸入元：(株)佐多商会 総販売元：東機貿

### 使用上の注意

本装置は医師の処方および指示に従ってご使用ください。  
本装置は生命維持のための装置ではありません。  
ご使用になる前に取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

輸入元 **帝人株式会社**

大阪市中央区南本町1-6-7

総販売元 **帝人株式会社**

在宅医療事業本部

東京都港区西新橋1-1-3 東京桜田ビル

輸入先製造業者 **ResMED** 社 [ オーストラリア ]

お問い合わせ先